

Dosaggio di liquidi in tutta sicurezza

Velocità, semplicità e accuratezza



Migliore compatibilità chimica

Disp-X di Rainin utilizza materiali inerti di alta qualità per assicurare la purezza dei reagenti dalla prima all'ultima aliquota. Disp-X è compatibile con un'ampia gamma di liquidi ed è autoclavabile per applicazioni biologiche.



Funzioni di sicurezza integrate

Il dosatore Disp-X include un sistema di sicurezza con tubo di scarico e tappo di chiusura per prevenire fuoriuscite o erogazioni accidentali. Il pistone in vetro interno è racchiuso in un manicotto in polipropilene inerte per prevenire danni e consentire il funzionamento continuo.



Controllo facile e intuitivo

L'impostazione del volume su Disp-X è semplice grazie alla manopola regolabile. È sufficiente posizionare l'indicatore in corrispondenza del volume desiderato e procedere. Per spostare in su e in giù il pistone occorre applicare pochissima forza. Le valvole di scarico sono semplici da pulire e sostituire.



Opzioni di dosaggio flessibili

Con Disp-X è possibile cambiare accessori in funzione dell'applicazione. La sostituzione degli accessori è rapida e semplice. I tubi di scarico e quelli di riempimento telescopico sono disponibili in diverse misure per soddisfare qualsiasi esigenza. I tappi dosatori Disp-X sono disponibili per volumi compresi tra 0,5 e 50 ml.



Tappo dosatore Rainin Disp-X™

Reagenti maneggiabili in modo semplice e sicuro

Il tappo dosatore manuale Disp-X di Rainin è un utile strumento per dosare i reagenti in maniera rapida, affidabile e sicura. Funzioni di sicurezza integrate proteggono l'utente dalle fuoriuscite accidentali e assicurano un funzionamento continuo e un dosaggio sicuro. Disp-X è compatibile con una vasta gamma di liquidi, inclusi quelli corrosivi ed infiammabili, perciò può essere utilizzato in numerose applicazioni nei laboratori biologici, farmaceutici, clinici, chimici e forensi. Disp-X può essere usato con diversi tipi di reagenti liquidi e offre una tenuta superiore a temperature e densità diverse. Disp-X è disponibile in 4 diversi range di volume: 0,5 – 5 ml, 1 – 10 ml, 2,5 – 25 ml e 5 – 50 ml.

Tappo dosatore Disp-X™


Dosaggio di liquidi in tutta sicurezza

Caratteristiche:

- Dosatore Disp-X interamente realizzato in materiale chimicamente inerte di alta qualità
- Il dosatore Disp-X può essere avvitato direttamente sui flaconi di reagente con filettature a vite GL 45; è possibile fissarlo ad altri tipi di flaconi utilizzando gli adattatori di serie
- Sostituzione semplice e rapida delle valvole di riempimento e di scarico per interventi di assistenza e manutenzione
- Tubo di riempimento telescopico a scatto semplice da sostituire
- Il pistone a tenuta stagna di Disp-X semplifica la manutenzione



Tappo dosatore Disp-X

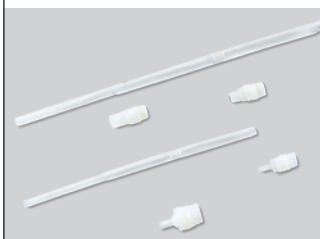

Accessori per tubi



Componenti Disp-X

Informazioni per l'ordine

Numero d'ordine MT	Descrizione
30373527	DX-5 Tappo dosatore Disp-X da 0,5–5 ml
30373528	DX-10 Tappo dosatore Disp-X da 1–10 ml
30373529	DX-25 Tappo dosatore Disp-X da 2,5–25 ml
30373750	DX-50 Tappo dosatore Disp-X da 5–50 ml
Accessori	
30373751	DX-DT10 Tubo di scarico Disp-X, 5 o 10 ml
30373752	DX-DT50 Tubo di scarico Disp-X, 25 o 50 ml
30373753	Tubo di riempimento Disp-X, 5 o 10 ml, lunghezza 125–240 mm
30373754	Tubo di riempimento Disp-X, 5 o 10 ml, lunghezza 250–480 mm
30373755	Tubo di riempimento Disp-X, 25 o 50 ml, lunghezza 170–330 mm
30373756	Tubo di riempimento Disp-X, 25 o 50 ml, lunghezza 250–480 mm
30373757	DX-FV10 Valvola di riempimento Disp-X, 5 o 10 ml
30373758	DX-FV50 Valvola di riempimento Disp-X, 25 o 50 ml
30373759	DX-DV10 Valvola di scarico Disp-X, 5 o 10 ml
30373760	DX-DV50 Valvola di scarico Disp-X, 25 o 50 ml

Specifiche tecniche

Parametro	Specifica
Temperatura di esercizio	da 15 a 40°C
Pressione del vapore	fino a 600 mbar
Densità	fino a 2,2 g/cm ³
Viscosità cinematica	fino a 500 mm ² /s
Accuratezza	≤0,5%
Ripetibilità	≤0,1%
Autoclavaggio	Autoclavabile fino a 121°C a 2 bar in conformità con lo standard DIN EN 285

Modello e volume	Sottodivisioni
Disp-X da 0,5–5 ml	0,1 ml
Disp-X da 1–10 ml	0,2 ml
Disp-X da 2,5–25 ml	0,5 ml
Disp-X da 5–50 ml	1 ml

I MARCHI RAININ: Rainin, Disp-X e Pipetting 360° sono marchi registrati di Mettler-Toledo Rainin, LLC.



Mettler-Toledo Rainin, LLC

7500 Edgewater Drive, Oakland, CA 94621
Tel. +1 510 564 1600
Fax +1 510 564 1604

Soggetto a modifiche tecniche

© 03/2017 Mettler-Toledo Rainin, LLC

Stampato su richiesta a partire dai contenuti disponibili online. 17700498 Rev. D

www.mt.com/rainin

Per maggiori informazioni